



Mais Versatilidade

Melhorando a experiência do cirurgião

Grampeador Endo GIA™ Ultra Universal

O novo grampeador Endo GIA™ Ultra Universal – Covidien, traz mais versatilidade combinando design ergonômico, articulação precisa e apreensão tecidual com uma única mão, melhorando a experiência do cirurgião.

Design Ergonômico

- Alça do gatilho reduzida, o que facilita o uso por cirurgiões com mãos pequenas
- O botão de descarga melhorado, simplifica a remoção das cargas após o disparo
- Manopla e botão de articulação emborrachados facilitam o controle

Articulação precisa e apreensão de tecido com uma mão:


- Dez pontos de articulação ampliam a precisão no posicionamento sobre o tecido alvo
- Articulação controlada pelo cirurgião de até 45 graus em ambos os lados possibilita melhor acessibilidade
- Mecanismo de apreensão com uma única mão, permite apreender e liberar o tecido movimentando-se a alça do gatilho

Versatilidade

- Pode ser usado com todas as cargas Endo GIA™ Universal
- Três tamanhos diferentes de haste possibilitam flexibilidade de acordo com o procedimento



Grampeador Endo GIA™ Ultra Universal

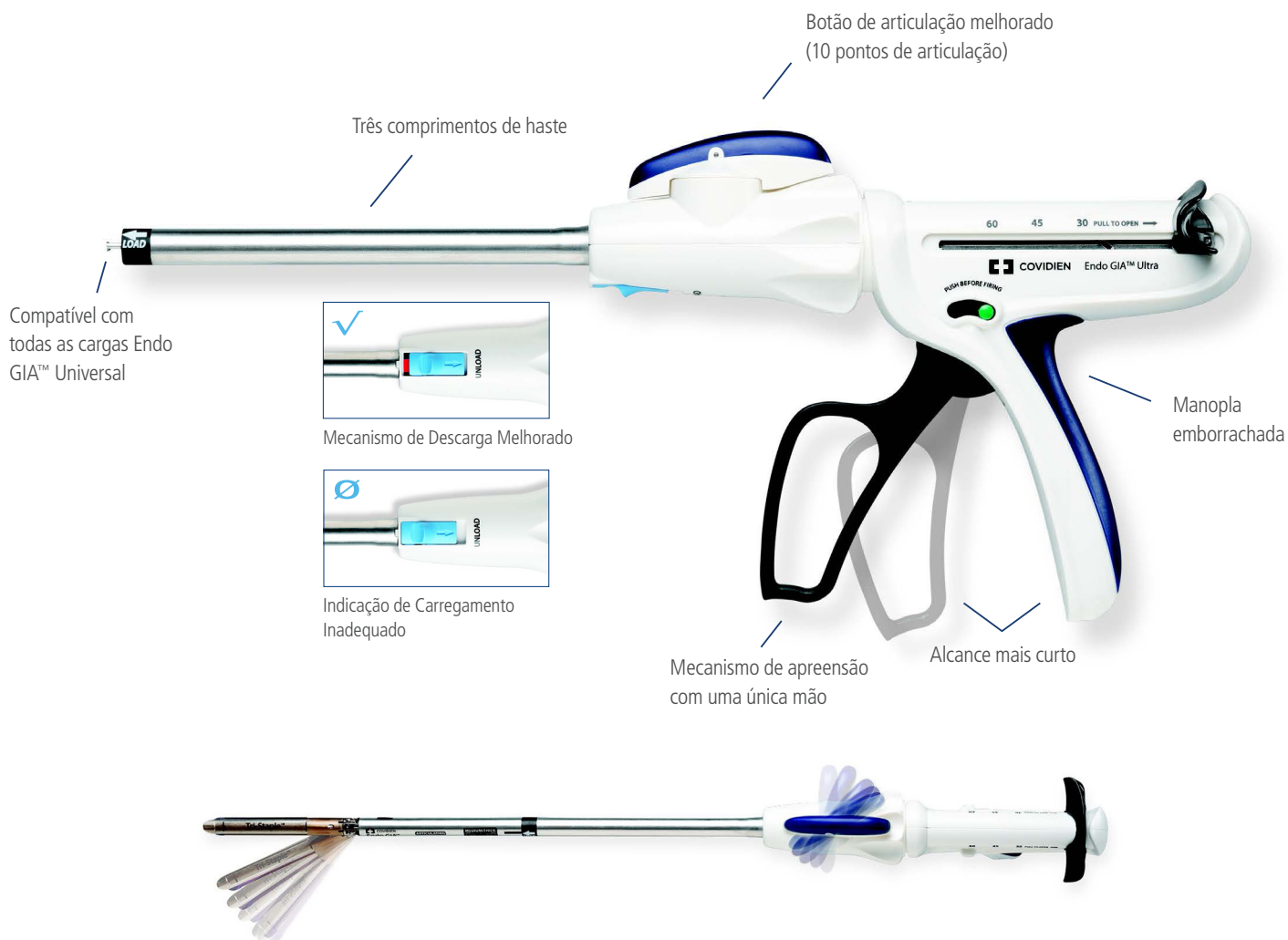

Produto	Código	Comprimento da Haste	Descrição
	EGIAUSHORT	6 cm	Grampeador Endo GIA™ Ultra Universal Curto
	EGIAUSTND	16 cm	Grampeador Endo GIA™ Ultra Universal
	EGIAUXL	26 cm	Grampeador Endo GIA™ Ultra Universal XL

IMPORTANTE:

Consulte as informações contidas na embalagem do produto para instruções completas, contraindicações e precauções.



COVIDIEN, COVIDIEN com o logo, logo da Covidien e positive results for life são marcas comerciais registradas nos EUA e/ou internacionalmente da Covidien AG. © 2010 Covidien. 03/10 P100023
Para mais informações ou para agendar uma demonstração do produto, entre em contato com o seu representante local da Covidien ou ligue para o Atendimento ao Cliente.

Reg. nº 10349000302
Reg. nº 10349000241
Reg. nº 10349000296
Reg. nº 10349000055