


Manipulador uterino Clearview

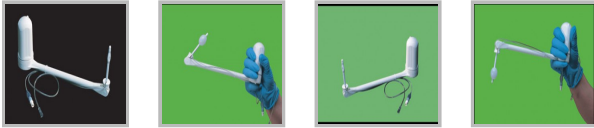

INDICAÇÃO

O Clearview está indicado para a manipulação uterina durante a laparoscopia diagnóstica e cirúrgica, minilaparotomia, salpingoplastia, LAVH, avaliação da fertilidade, adesiólise e tratamento da endometriose.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

O Clearview permite a anteversão, retroversão e a movimentação lateral para se obter uma ótima visibilidade e movimentação uterina. O pivô, que fica localizado no cérvix, proporciona a rotação da ponta do manipulador uterino, através do botão de controle de rotação.

Segurança:

A extremidade distal da ponta, em silicone reduz o risco de perfurações; a ponta estreita reduz a necessidade de dilatação e diminui o trauma; a paciente pode permanecer na posição supina; O balão em silicone macio possui válvula para controle da insuflação.

Possui via para cromotubagem; proporciona exposição eficaz que permite uma visualização completa do útero e é desnecessária a assistência para segurar o manipulador. Todas essas características garantem rapidez e segurança ao procedimento.

Modelos disponíveis UM700 (7cm) e UM900 (9 cm)

CÓDIGOS

UM201/CV100001 manipulador uterino descartável, extremidade distal com 7 cm de comprimento.
UM202/CV200001 manipulador uterino descartável, extremidade distal com 9 cm de comprimento.

Fabricante: Clinical Innovations – Estados Unidos

ANVISA: 80517980053