


Manipulador uterino cirúrgico VECTEC

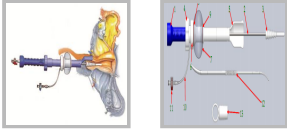

INDICAÇÃO

O manipulador uterino cirúrgico Vectec destina-se a expor o útero, através de deslocamentos na cavidade abdominal. O manipulador permite também facilitar a apresentação do fundo vaginal na histerectomia total, conservando o pneumoperitônio. O produto é de uso exclusivo na cirurgia ginecológica.

DESCRIÇÃO TÉCNICA

O manipulador uterino cirúrgico Vectec consiste em uma haste metálica com empunhadura ergonômica, extremidade distal com uma boquilha atraumática em forma de parafuso. Na haste metálica desliza-se um corpo em policarbonato com copo guia para corte e um balão, com extensão para insuflação. O copo guia para corte está livre em rotação e translação e permite assegurar o corte preciso (ablação do útero). O balonete permite garantir o pneumoperitônio desde o início da ablação do útero. Vem acompanhado de dispositivo de dilatação do colo uterino e tampa do balão.

Legenda foto:

1. Empunhadura
2. Haste metálica
3. Extremidade distal em parafuso
4. Corpo do manipulador
5. Copo guia para corte
6. Peça de sustentação do balão
7. Balão
- 8 e 9. Vedação do balão
10. Extensão de insuflação
11. Torneira vermelha
12. Dispositivo de dilatação
13. Tampa do balão.

CÓDIGO - MAUT60

Fabricante: VECTEC /França

Nº de Registro ANVISA: 80517980044