



COVIDIEN


*positive results for life™*

## Parietene™ ProGrip™

### O Verdadeiro Reparo de Hérnia Sem Tensão. Autoaderente e Fácil de Usar.

Parietene™ ProGrip™ (tela de polipropileno monofilamentar) é a única tela autoaderente, parcialmente absorvível e de baixo peso disponível para o reparo da hérnia inguinal com cirurgia aberta.

#### Tela de biocomponente com monofilamentos de polipropileno (PP) e ácido polilático (PLA)

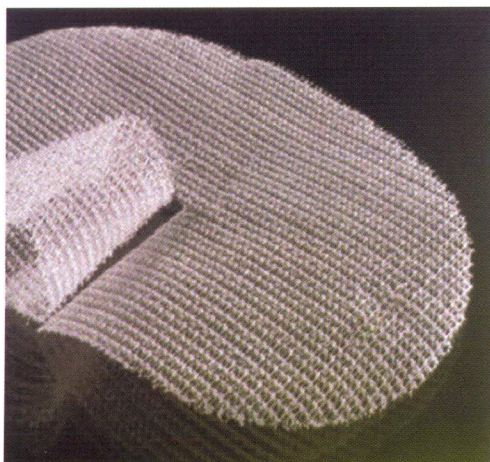

- Aperfeiçoa o reparo sem tensão. Distribuição homogênea da tensão sobre toda a superfície de contato da tela.
- Microganchos cobrem toda a parte inferior da tela, permitindo a completa ancoragem da tela no tecido.
- Tela de baixo peso (40 g/m<sup>2</sup> após absorção).
- Porosidade ideal (dimensão do poro: 1,6 x 1,1 mm) para crescimento interno rápido e otimizado do tecido através dos poros da tela.
- Aba autoaderente permite o ajuste ideal ao redor do cordão.
- Formato elíptico adapta-se à anatomia da região inguinal.
- Uma vez pressionada contra o músculo, a tela adota e respeita a anatomia da região inguinal.

